




Oval-8® Finger Splints af 3-Point Products Størrelsesguide (Printbar version)

Oval-8® Finger skinne størrelsesguiden vil hjælpe dig med at vælge den korrekte størrelse af skinnen, som har størst sandsynlighed for at passe til netop din finger.

Den mindste hævelse eller temperaturændring kan have en effekt på din fingers størrelse, og der er derfor ikke garanti at kun én enkelt fingerskinne vil være 100% akkurat på din finger.

Vi anbefaler at bestille et **Graduated sæt med tre størrelser** for en større præcision, når der skal findes størrelse.

Sæt denne ende på først for at passe til en fuld størrelse

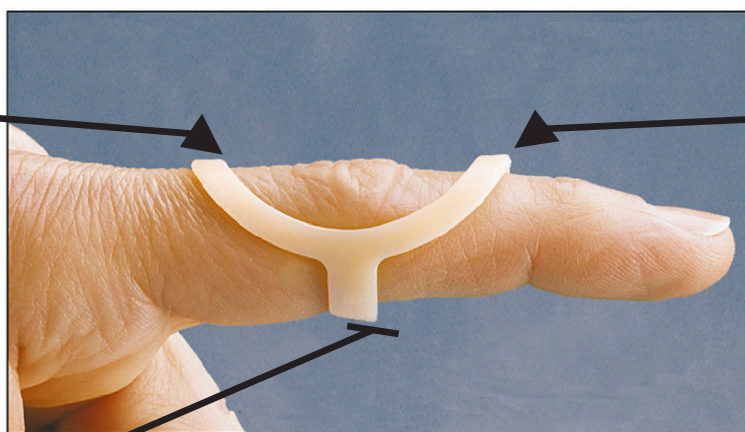


Sæt denne ende på først, så den passer til en størrelse og en halv

Det vinklede bånd gør det muligt for hver Oval-8-skinne at passe til to størrelser

Størrelsesguide instruktioner

For at benytte størrelsesguiden skal du bruge en saks og en lineal. Klip guiden ud under den stiplede linje, og følg instruktionerne herunder. Hvis det giver udfordringer at benytte en saks, kan det være en fordel at have nogen til at hjælpe dig med at klippe størrelsesguiden ud.

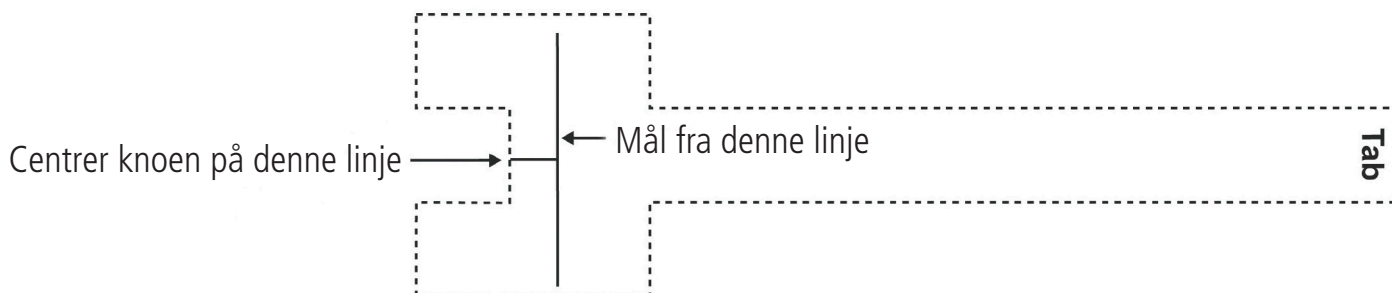





Oval-8® Finger Splints af 3-Point Products

Størrelsesguide (Printbar version)


Illustrationerne herunder viser hvordan du måler den midterste kno (PIP led) når du bærer Oval-8® på leddet for "Swan neck", Boutonniere eller andre lidelser der påvirker det midterste led.

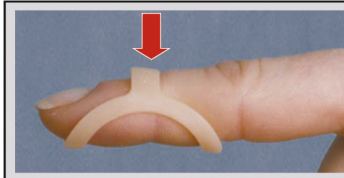


Hvis du vil påsætte Oval-8® på en hammer finger Snor størrelsesguiden rundt om ENDE KNOEN (DIP led) tættest på fingerneglen.

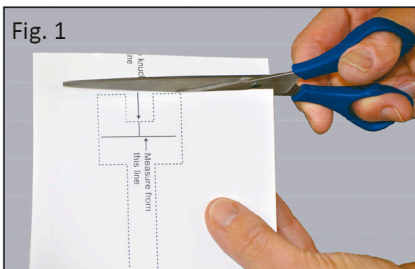


Klip størrelsesguiden ud langs den stiplede linje.

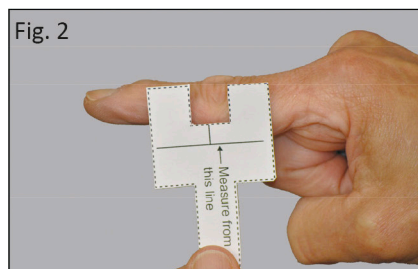


Placer størrelsesguiden centreret, således det åbne stykke på størrelsesguiden er ved midten af knoen der skal måles.

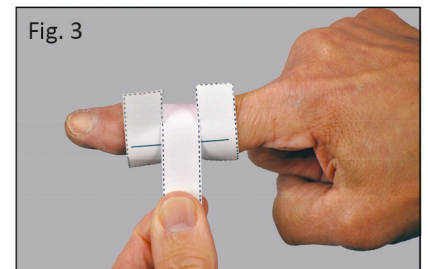

Sno den lange tap rundt om fingeren og gennem det åbne stykke på størrelsesguiden indtil den overlapper "Measure from" linjen.

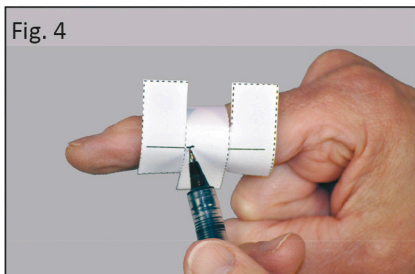


Træk let på tappen så papiret ligger jævnt rundt om leddet. Tegn en linje på tappen, hvor den overlapper målelinjen.

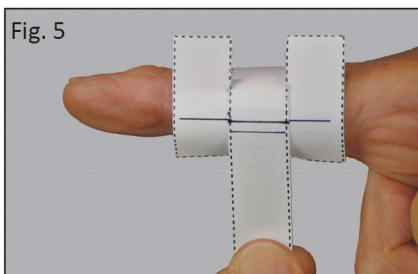

Træk tappen mere fast rundt om leddet for at opnå en tæt tilpasning og markér en anden linje på tappen, hvor den overlapper målelinjen.



Det er anbefalet at du markerer tappen to steder for at etablere en række af størrelser at vælge fra, når der skal besluttes hvilken størrelse Oval-8® du har brug for.

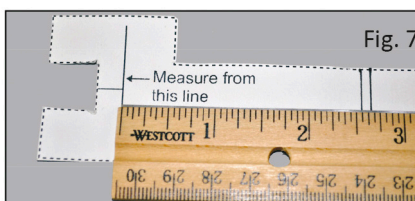

Ved at benytte en lineal, mål her fra den printede, faste linje. Mål afstanden fra den nærmeste millimeter.



Brug disse mål til at afgøre de anbefalede størrelsesmodeller af Oval-8® til netop din finger. (Se næste side for flere detaljer.)



Oval-8® Finger Splints af 3-Point Products

Størrelsesguide (Printbar version)

Graduated Sæt

Når du skal beslutte hvilket Graduated sæt du skal bestille, overvej følgende faktorer:

- Hvis din fingre har tendens til at hæve, bestil derved et sæt med store størrelser.
- Hvis du bærer skinner i vand eller i koldt vejr, bestil derved et sæt med mindre størrelser
- Hvis du har hævelser der forventes at mindskes, bestil derved et sæt med mindre størrelser

Graduerede sæt af 3 splints	Størrelsesintervaller	Graduerede sæt af 3 splints	Størrelsesintervaller
Str. 2 - 3 - 4	4,3 til 4,95 cm	Str. 8 - 9 - 10	6,14 til 6,8 cm
Str. 4 - 5 - 6	4,95 til 5,70 cm	Str. 10 - 11 - 12	6,8 til 7,4 cm
Str. 6 - 7 - 8	5,70 til 6,14 cm	Str. 8 - 9 - 10	7,65 til 8,2 cm

Individuelle skinner

Hvis du har fået målt størrelse af fagperson, som kender Oval-8® finger skinner og herved kender de korrekte størrelser, eller er ved at bestille en udskiftning og / eller flere skinner.

Oval-8 Størrelser	Størrelsesintervaller	Oval-8 Størrelser	Størrelsesintervaller
2	4,3 cm	9	6,35 cm
3	4,5 cm	10	6,82cm
4	4,95 cm	11	7,09 cm
5	5,27 cm	12	7,4 cm
6	5,70 cm	13	7,65 cm
7	5,86 cm	14	7,09 cm
8	6,14 cm	15	8,20 cm